

F

GAMA



Congeladores de laboratorio

B Medical Systems | Gama F

Los congeladores de laboratorio son dispositivos destinados al almacenamiento seguro de muestras, especímenes, vacunas de virus vivos, cultivos, materiales de prueba, productos químicos, reactivos y otras preparaciones de laboratorio a temperaturas inferiores a -20°C .

Conforme DIN 13277 | Dispositivos Médicos según MDR (EU) 2017/745, Clase I o 21CFR Part 862.2050, Clase I



medical
systems

SAVING LIVES
THROUGH RELIABLE
AND INNOVATIVE
TECHNOLOGY

Medical Refrigeration



Estándares de seguridad

B Medical Systems

Los estándares de seguridad desarrollados por B Medical Systems definen las características técnicas de un producto. Estos garantizan el almacenamiento seguro de los preparados, así como la fijación de los más altos estándares de seguridad para el usuario.

PRECISION LINE	PREMIUM LINE	
●	●	Electrónica de B Medical Systems
●		Pantalla digital B Medical Systems
	●	Pantalla táctil completa de 7" B Medical Systems
●		Cierre de seguridad (con 2 llaves) y interruptor principal accionado mediante llave ENCENDIDO / APAGADO (con 2 llaves)
●	●	Indicador de control de red y visualización digital de temperatura (resolución: 0.1°C)
	●	Sistema de refrigeración regulado y sin escarcha para una temperatura constante y de equilibrada distribución en toda la cámara de refrigeración
	●	Apagado automático al abrir la puerta frontal
●	●	Alarma independiente de la red con batería integrada. Se encarga de la función de alarma y de las mediciones de las temperaturas en caso de corte de corriente durante al menos 48 h
●	●	Señal de alarma acústica y óptica en caso de alarma de temperatura y fallo de red
	●	El historial de la electrónica almacena todos los valores importantes durante una alarma de temperatura: tempe. mín., máx., promedio y duración de la alarma
●	●	Señal de alarma remota (mediante contacto sin potencial) en caso de alarma de temperatura (contacto inversor)
●	●	Alarma de puerta abierta (óptica / acústica)
●		Diseñado y comprobado para la clase climática SN (rango de temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C)
	●	Diseñado y comprobado para la clase climática SN / T (rango de temperatura ambiente de +10°C hasta +43°C)
	●	Cámara interior de acero inoxidable
●	●	Señal de alarma remota adicional (mediante contacto sin potencial) en caso de fallo de red (contacto inversor)
	●	Ruedas articuladas de accionamiento suave para una máxima adaptabilidad al espacio
	○	Refrigeración por agua externa
	○	Sensor de temperatura ambiente
	●	Interfaz ethernet para visualizar todas las funciones de mando y control (ajustes de hardware y software) mediante software de monitorización *B Connected en aparato periférico (ordenador)
○	○	*B Connected - Software universal para monitorear dispositivos de refrigeración incluyendo la adquisición, el registro y la visualización de datos de temperatura
○		DCU (Data Communication Unit) - Módulo de hardware que monitorea todas las condiciones de funcionamiento y las transmite a una base de datos central a través de una red local (en combinación con *B Connected)
	○	Dispositivo de Monitoreo Remoto de Temperatura integrado (RTMD), ofrecen monitoreo remoto de temperatura en tiempo real a nivel mundial, acceso a la información a través de la WEB y el módulo GPS

● Estándar ○ Opcional

Congeladores de laboratorio

B Medical Systems | Gama F

Los congeladores de laboratorio son dispositivos destinados al almacenamiento seguro de muestras, especímenes, vacunas de virus vivos, cultivos, materiales de prueba, productos químicos, reactivos y otras preparaciones de laboratorio a temperaturas inferiores a -20°C , desarrollados como resultado de más de 40 años de experiencia en tecnología de refrigeración.

7 modelos • Volumen 121 > 949 L • Set point -41°C / -32°C • Clase climática SN I SN/T • Conforme DIN 13277 | MDR (EU) 2017/745, Clase I


De conformidad con las regulaciones y directivas nacionales e internacionales sobre dispositivos médicos, ofreciendo fiabilidad, eficiencia y seguridad a precios óptimos.

MODELOS F130-290-380 | PRECISION LINE



● Electrónica multifunción integrada

Electrónica multifunción B Medical Systems integrada, a un nivel de fácil acceso, en la manija de la puerta; ofrece alarmas, un sistema de alarma central, seguridad de punto de ajuste, batería de reserva, pantalla completa y muchas otras características de control; compatibles con una solución de monitoreo °B Connected para monitoreo y registro de datos.

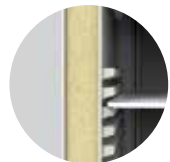

● Modelos rotomoldeados o de acero

- **Modelo F130:** Gabinete de material de una pieza con garantía de corrosión cero de por vida; polipropileno de máxima calidad para un mejor aislamiento y bordes sin filos para un mantenimiento y limpieza más fáciles
- **Modelos F290-380:** Los armarios de acero se caracterizan por un menor consumo energético global, una distribución de la temperatura superior y una circulación del aire muy estable dentro del armario, una notable estanqueidad entre las juntas, una larga autonomía y tiempos de permanencia, y una excepcional vida útil del compresor
- **Ergonomía inteligente:** manejo más fácil y seguro gracias a los componentes más pesados colocados en la parte inferior



● Gran capacidad de almacenamiento

Elevado almacenamiento por metro cuadrado en cuanto a volumen neto, con utilidad volumétrica interior de gran versatilidad gracias a los múltiples carriles de fácil uso que permiten la modularidad.



● Exclusiva manija de barra con electrónica integrada

Todas las funciones son fácilmente accesibles:

- Control digital con todas las funciones: Pantalla táctil completa de 7" B Medical Systems integrada a una altura óptima en la manija de la puerta, con conexión preinstalada que permite las funciones exclusivas de monitoreo °B Connected
- Apertura y cierre con mecanismo 'para uso rudo' de bloqueo de puerta



● Materiales de alta calidad

Revestimiento de gran calidad, dispositivo médico certificado, antibacteriano y de acero de alta calidad para mayor duración y fácil control de la higiene.



● Modularidad versátil

Excelente capacidad de almacenamiento y modularidad: Amplia gama de cajones y estantes para cada necesidad.

● Deshielar y descongelar con facilidad

- Evaporador que ofrece un rendimiento superior a la media del mercado permitiendo una menor formación de hielo y descongelación automática
- Puertas con aislamiento interior para una pérdida de frío considerablemente menor durante su apertura

MODELOS F400-500-700-900 | PREMIUM LINE

F
GAMA

Datos técnicos

Características generales



generales				F130			F290			F380			F400			F500			F700			F900		
Volumen bruto / neto (l)				121 / 106			296 / 281			338 / 318			478 / 387			634 / 514			791 / 641			949 / 768		
Temperatura preconfigurada (Set Point)				-32°C									-41°C											
Rango de temperatura configurable <i>puede configurar en pasos de 0.1°C</i>				-32°C a -20°C									-41°C a -20°C											
Temperatura de alarma de frío / calor				-37°C / -27°C									-46°C / -32°C											
Hold over time				1.6 h (-32°C a -23°C)			1.8 h (-32°C a -23°C)			1.7 h (-32°C a -23°C)			4.9 h (-41°C a -10°C (230V) / -41°C a -18°C (115-127V & 220V))			5.5 h (-41°C a -10°C (230V) / -41°C a -18°C (115-127V & 220V))			6.0 h (-41°C a -10°C (230V) / -41°C a -18°C (115-127V & 220V))			5.7 h (-41°C a -10°C (230V) / -41°C a -18°C (115-127V & 220V))		
Clase climática (rango de temperatura)				SN (+10°C a +32°C)									SN / T (+10°C a +43°C)											
Descongelación				Manual									Automática (gas caliente)											
Refrigerante				R290									R290											
Dimensiones exteriores al x an x fo (mm)				830 x 595 x 695			1750 x 603 x 650			1950 x 603 x 650			1988 x 699 x 1039			1988 x 845 x 1039			1988 x 992 x 1039			1988 x 1139 x 1039		
Dimensiones interiores al x an x fo (mm)				630 x 475 x 470			1525 x 475 x 421			1735 x 475 x 421			1173 x 447 x 738			1173 x 593 x 738			1173 x 740 x 738			1173 x 887 x 738		
Peso neto con equipo estándar (kg)				58	58	60	97	97	94	106	106	103	276			301			319			346		
Energy Saver	Rango de tensión (V)			220-240	220-240	115-127	220-240	220-240	115-127	220-240	220-240	115-127	230	220	115-127	230	220	115-127	230	220	115-127	230	220	115-127
	Frecuencia (Hz)			50	60	60	50	60	60	50	60	60	50	60	60	50	60	60	50	60	60	50	60	60
	Potencia (W)			300	300	360	300	300	360	300	300	360	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	Consumo de energía (kWh/24h)			2.8	2.9	3.1	2.2	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	5.4	5.0	4.9	6.6	5.4	5.2	7.4	5.7	5.3	6.8	6.1	7.6
	Calor disipado (Kcal/h)			100	100	111	162	162	150	153	153	153	193	178	176	236	192	186	265	205	190	244	219	272
	Tiempo de marcha del compresor (%)			51	51	50	54	54	41	50	50	40	50	40	40	42	40	43	50	39	43	50	43	52
	Nivel de ruido (dB(A)) <i>(a 1m de altura y a 1m de distancia)</i>			45	47	47	36	37	37	37	38	38	47	49	50	44	46	47	45	47	48	45	47	48



Datos técnicos Especificaciones



F130

F290-380

F400-500-700-900

Sensor de regulación		NTC, a 0°C ± 0.3°C		PT1000, a 0°C ± 0.1°C	
Sensor indicador en líquido de referencia 100 ml DOW Corning 200-5CST (Aceite de silicona)		NTC, a 0°C ± 0.3°C		PT1000, a 0°C ± 0.1°C	
Accu data tiempo de funcionamiento del panel de control cuando el suministro eléctrico falla		12 V - 2.3 Aal / 48h		12 V - 10.0 Aal / 48h	
Humedad relativa a +32°C		≤ 75%			
Aislamiento de la puerta (poliuretano)		82 mm PU	65 mm PU	65-82 mm PU	
Aislamiento de la carcasa (poliuretano)		60-65 mm PU	57-82 mm PU	77-82 mm PU	
Material	Interior del armario / de la puerta	Polipropileno (copolímero UV)		Acero inoxidable (1.4301)	
	Exterior del armario / de la puerta	Polipropileno (copolímero UV)	Acero pintado	DX51D + Z100 revestida	
	Puertas int. individuales	-		Aluminio anodizado	
	Cajón	Policarbonato transparente		-	
	Bandeja	-		Malla DIN 177, PA11 revestida	
Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos		MDR (EU) 2017/745, Clase I (modelos: 220-240 V - 50/60 Hz & 230 V - 50 Hz)			
Directiva CEM (compatibilidad electromagnética)		2014 / 30 / EU (modelos: 220-240 V - 50/60 Hz & 230 V - 50 Hz)			
Directiva de Baja Tensión		2014 / 35 / EU (modelos: 220-240 V - 50/60 Hz & 230 V - 50 Hz)			
Regulación FDA de Dispositivos Médicos		21CFR Part 862.2050, Clase I (modelos: 115-127 V - 60 Hz & 220 V - 60 Hz)			
Certificado cCSAus		Si (modelos: 115-127 V - 60 Hz & 220 V - 60 Hz)			
Certificado Energy Star		Si (modelos: 115-127 V - 60 Hz exceptuando los modelos F130, F380, F400, F500, F700)			
Clase de sala limpia ISO 14644-1		Clase 6		Clase 4	



Equipo General



PANTALLA
TÁCTIL
COMPLETA 7"



MANIJA
DE PUERTA
ERGONÓMICO



PUERTAS
INTERIORES
INDIVIDUALES

También disponible
con 4 puertas interiores
individuales



REGISTRADOR
GRÁFICO DE
TEMPERATURA

(imagen
no contractual)

		F130	F290	F380	F400	F500	F700	F900
<i>Electrónica B Medical Systems</i>	<i>Pantalla digital</i>	●	●	●	-	-	-	-
	<i>Pantalla táctil completa 7"</i>	-	-	-	●	●	●	●
<i>Manija de puerta ergonómico Apertura y cierre con mecanismo 'para uso rudo' de bloqueo de puerta</i>		-	-	-	●	●	●	●
<i>Puertas interiores individuales para minimizar las pérdidas de aire frío</i>		-	-	-	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4
<i>Interfaz ethernet</i>		-	-	-	●	●	●	●
<i>*B Connected - Software de monitoreo</i>		○	○	○	○	○	○	○
<i>DCU - Unidad de comunicación de datos (en combinación con *B Connected)</i>		○	○	○	-	-	-	-
<i>Dispositivo de Monitoreo Remoto de Temperatura integrado (RTMD)</i>		-	-	-	○	○	○	○
<i>Registrador gráfico de temperatura sobintegrado (en forma de diagrama circular)</i>		○	○	○	○	○	○	○
<i>Sensor de temperatura ambiente</i>		-	-	-	○	○	○	○
<i>Señal de alarma (contacto sin potencial) en caso de falla en el suministro eléctrico</i>		●	●	●	●	●	●	●
<i>Ejecución en el local para sensor externo (del cliente)</i>		●	●	●	●	●	●	●
<i>Refrigeración por agua externa</i>		-	-	-	○	○	○	○
<i>Rueditas</i>		● 2	● 2	● 2	-	-	-	-
<i>Ruedas de accionamiento suave</i>		-	-	-	● 4	● 4	● 4	● 4
<i>Bisagras de puerta a derecha izquierda</i>		● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○

● Estándar ○ Opcional - No disponible



Equipo Almacenaje interior



CAJÓN

2 versiones:
• con o sin
fachada frontal
• inferior




**BANDEJA
DE CELOSÍA**




ST-CAJÓN
(ST= ACERO INOXIDABLE)

Disponible con o sin
fachada frontal

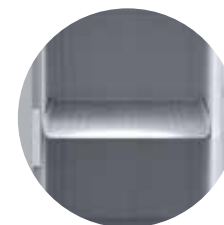

ST-BANDEJA
(ST= ACERO INOXIDABLE)

Estándar	F130	F290	F380	F400	F500	F700	F900
<i>Cajón con fachada frontal</i>	● 2	● 6	● 7	-	-	-	-
<i>Cajón sin fachada frontal</i>	-	● 1	● 1	-	-	-	-
<i>Cajón inferior</i>	● 1	● 1	● 1	-	-	-	-
<i>Bandeja de celosía</i>	-	-	-	● 5	● 5	● 5	● 5
Opcional							
<i>ST-Cajón con fachada frontal</i>	-	-	-	○ 5 (Máx. por modelo)	○ 5 (Máx. por modelo)	○ 5 (Máx. por modelo)	○ 5 (Máx. por modelo)
<i>ST-Cajón sin fachada frontal</i>	-	-	-	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)
<i>ST-Bandeja</i>	-	-	-	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)
Accesorios							
<i>Set de separadores (al 100 mm) para facilitar la manipulación y la organización</i>	○ 2 (Máx. por modelo)	● 6	● 7	-	-	-	-
<i>S-Rack (al 100 x an 113 x fo 638 mm)</i>	-	-	-	○ 15 (Máx. por modelo)	○ 20 (Máx. por modelo)	○ 25 (Máx. por modelo)	○ 30 (Máx. por modelo)
<i>ST-Rack (al 95 x an 134 x fo 648 mm)</i>	<i>con bandeja de celosía</i>	-	-	○ 2 (Máx. por nivel)	○ 3 (Máx. por nivel)	○ 3 (Máx. por nivel)	○ 4 (Máx. por nivel)
	<i>con ST-Cajón</i>	-	-	○ 2 (Máx. por nivel)	○ 2 (Máx. por nivel)	○ 3 (Máx. por nivel)	○ 4 (Máx. por nivel)
	<i>con ST-Bandeja</i>	-	-	○ 2 (Máx. por nivel)	○ 3 (Máx. por nivel)	○ 4 (Máx. por nivel)	○ 4 (Máx. por nivel)
<i>ST-Cover para bandeja de celosía</i>	-	-	-	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)	○ 13 (Máx. por modelo)

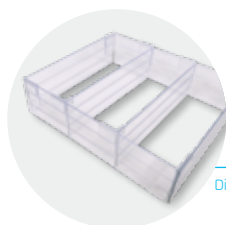


**SET DE
SEPARADORES**


Disponible para cajón
con fachada frontal



S-RACK

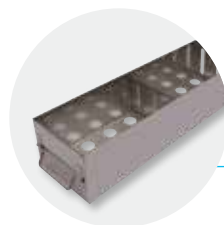

ST-RACK
(ST= ACERO INOXIDABLE)

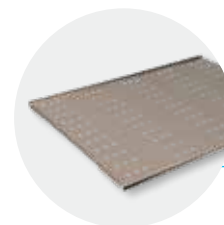

ST-COVER
(ST= ACERO INOXIDABLE)

Disponible para
bandeja de celosía

● Estándar ○ Opcional - No disponible

Reservado el derecho de modificación sin aviso previo.

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Todas las funciones de un vistazo

B Medical Systems | Electrónica

PRECISION LINE | Electrónica multifunción con pantalla digital y fácil acceso, integrada en la manija de la puerta; compatible con solución de monitoreo °B Connected.



● Interruptor de llave

0 = OFF (apagado) / I = ON (encendido)

- Para encender la unidad, gire el interruptor de llave hasta la posición "I". El led verde de encendido se ilumina
- Después del autocontrol, se visualiza la temperatura interna del dispositivo



● Pantalla digital

Durante el funcionamiento normal, en la pantalla se muestra:

- Lado izquierdo: hora actual y temperatura interna indica en °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) en incrementos de 0.1°
- Lado derecho: la temperatura interna máxima y mínima



● Señal de alarma acústica y visual

Cuando se genera una alarma, el led rojo de alarma se ilumina y suena una señal acústica. El mensaje de alarma correspondiente aparece en la pantalla alternando con la temperatura interior medida. Si se generan varias alarmas al mismo tiempo, los mensajes se indican alternativamente.



● Botones de función

- Botones ARRIBA / ABAJO: navegación dentro de parámetros y modificación de sus valores
- Botón ENTRAR: uso de la tecla ENTRAR para confirmar la selección actual. Esto se aplica al valor del parámetro. El cambio de un parámetro sólo se hace efectivo al confirmarlo
- Botón SILENCIAR / ATRÁS: en caso de alarma, la alarma acústica se puede apagar durante un tiempo especificado. En el modo de parámetro, la misma tecla funciona como "botón ATRÁS" para volver un paso



● Puerto USB

Se dispone de un puerto USB sólo para exportar datos. Los valores medidos del sensor de pantalla se almacenan como mínimo 30 días (búfer en anillo) junto con una marca de tiempo.



La electrónica B Medical Systems ofrece una amplia gama de posibilidades de ajuste y diagnóstico, así como operaciones adicionales de protección / advertencia (mediante operaciones de alarma externa, historiales y señales individuales en pantalla).

PREMIUM LINE | Electrónica multifunción con pantalla táctil completa de 7", integrada a una altura óptima en la manija de la puerta con conexión preinstalada que permite las funciones exclusivas de monitoreo °B Connected.



● Interruptor OFF (apagado) / ON (encendido)

- Para encender, presione el botón ON/OFF durante 1 segundo. El led verde se iluminará
- Apagado protegido por contraseña. La puerta se desbloqueará automáticamente antes del apagado



● Pantalla táctil completa de 7"

Durante el funcionamiento normal, en la pantalla se muestra:

- En la parte superior: tensión de corriente, hora actual, descongelación, calentador de junta y estado de inicio de sesión (nivel de usuario)
- Lado izquierdo: temperatura del sensor de regulación (la visualización de esta temperatura se puede deshabilitar mediante los ajustes) y temperatura interna indica en °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) en incrementos de 0.1°
- Lado derecho: botones táctiles para desbloquear la puerta, acceder al menú, la limpieza, la alarma silenciosa y funciones de mensaje



● Puerto USB y lector de tarjetas SD

● Señal de alarma acústica y visual

Cuando se genera una alarma, el led rojo de alarma se ilumina y suena una señal acústica. El mensaje de alarma correspondiente aparece en la pantalla junto con la temperatura interior medida. Si se generan varias alarmas al mismo tiempo, los mensajes se indican alternativamente.



● Lector de tarjetas de clave

Login / desbloquear utilizando una tarjeta NFC

● Botones táctiles

- Botón DESBLOQUEO DE PUERTA: desbloquea la puerta del dispositivo
- Botón LIMPIAR: el botón de limpieza permite al usuario deshabilitar la capacidad táctil de la pantalla por un breve período de tiempo para poder limpiar la pantalla. Este botón se reemplaza por el botón de cierre de sesión cuando ningún usuario está conectado
- Botón MENÚ: permite acceder a la pantalla del menú
- Botón SILENCIAR ALARMA: desactiva la alarma acústica durante un periodo de tiempo predefinido
- Botón ALARMA Y ADVERTENCIA: durante una advertencia o situación de alarma, el color de este botón y el nivel correspondiente cambiarán. A la información sobre la alarma activa y la advertencia se accede pulsando el botón de mensaje



Para un control y protección óptimos

B Medical Systems | °B Connected & DCU



°B CONNECTED | SOFTWARE DE MONITOREO

Software universal para monitorear dispositivos de refrigeración incluyendo la adquisición, el registro y la visualización de datos de temperatura.



- Único software de monitoreo en la gama completa de “Blood Management Solutions” y productos de “Medical Refrigeration”
- Interfaces basadas en web para computadoras y dispositivos móviles
- Diseño moderno para un uso sencillo e intuitivo
- Pantalla gráfica de curvas de temperatura
- Historial integrado de eventos y actividades de los componentes del aparato
- Registro de datos en una base centralizada de datos para archivar a largo plazo
- Configuración sencilla de transmisión específica de alarmas por e-mail o mensaje de texto
- Generación de informes con recopilación de datos y actividades esenciales
- Exportación de datos detallados de temperatura y del dispositivo para softwares de terceros
- Importante ventaja de precio en comparación con un registrador gráfico circular tradicional y sus repuestos
- REST API para acceder a los datos brutos directamente desde la base de datos en modo de solo lectura

BENEFICIOS CLAVE:

- Única interfaz para monitorear la gama completa de dispositivos de refrigeración
- Base centralizada de datos que ofrece acceso a la red completa del cliente

1 CONFIGURACIÓN



GESTIÓN DE USUARIOS

- Contraseña de inicio de sesión
- Derecho de acceso



AJUSTES DEL DISPOSITIVO

- Información del dispositivo
- Configuración del dispositivo y usuarios



PERFIL DE ALARMA

- Parámetros del perfil de alarma (día, hora, minuto)
- Gestión de alarma

2 VISUALIZACIÓN



PANTALLA DETALLADA

- Diseño optimizado para dispositivos móviles y táctiles compatibles
- Soporte de varios idiomas
- Datos en tiempo real: temperaturas actuales, punto de ajuste, límite superior e inferior, estado de la puerta, tiempo de ejecución del compresor
- Datos de registro: eventos, alarmas dentro de fecha/hora, tipo de evento, descripción del evento. Función de confirmación de evento y alarma
- Ajuste de parámetros de cada dispositivo: ajustes de fábrica, reloj en tiempo real, idioma, versión de firmware, dirección RS485, dirección IP

°B Connected y la DCU ofrecen un sistema altamente flexible que se adapta a los requisitos de un cliente específico

- > Documentación completa y legalmente segura de los datos de temperatura
- > Uso completo y posibilidades de diagnóstico

3 ANÁLISIS




GRÁFICOS EN TIEMPO REAL

- Gráfico de progreso de la temperatura (en tiempo real)
- Eje de tiempo ajustable
- Navegación sin conexión



CENTRO DE CONTROL

- Vista general (monitor de control) de todos los aparatos monitoreados:
- información sobre el estado, nombre del aparato, ubicación, conexión, límite inferior y superior, temperatura actual, eventos/alertas
 - Panel para combinar varias mediciones de temperatura en un solo gráfico

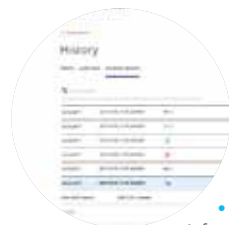

ANÁLISIS INTERACTIVO

- Sin limitación en cuanto a intervalo de tiempo
- Libremente escalable
- Información detallada para cualquier momento
- Datos de temperatura, eventos y alarmas
- Historial de inicio de sesión y traza de auditoría




ANÁLISIS IMPRESOS

- Impresión personalizada de informes por día, semana y mes
- Exportación en varios tipos de archivo
- Formato estandarizado

DCU | UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE DATOS (PRECISION LINE)

Módulo de hardware que monitorea todas las condiciones de funcionamiento y las transmite a una base de datos central a través de una red local.

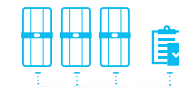

- Conexión de interfaz de aparatos de B Medical Systems a una red existente
- Interfaz gráfica de usuario para mostrar las temperaturas y configurar fácilmente dispositivos y alarmas
- Conexión directa a Ethernet y al bus en serie RS485
- Entrada y salida digitales (programables y de uso específico del cliente)
- Registro y almacenamiento de datos relevantes del aparato
- Puerto USB y lector de tarjetas SD que permiten exportar datos almacenados
- La DCU en combinación con el software °B Connected reemplaza al registrador de temperatura en papel
- Se registran todos los datos y se guardan en el almacenamiento interno de la DCU y se guardan copias de seguridad en la base de datos de °B Connected si está conectada
- Es posible conectar varios sensores de temperatura autosuficientes adicionales (hasta 4 PT1000)
- Entrada para sensor de humedad (4-20 mA)

BENEFICIOS CLAVE:

- Sistema central para recopilar datos relevantes de temperatura de los aparatos y sus respectivas condiciones de funcionamiento
- Varias posibilidades de conexión que permiten actualizaciones flexibles para proyectos individuales



Blood Management Solutions

Manejo global y seguro de la sangre: desde la recolección hasta la transfusión, el transporte, el procesamiento y el almacenamiento



Vaccine Cold Chain

Soluciones confiables para una vacunación segura alrededor del mundo



Medical Refrigeration

Tecnología de vanguardia para las exigentes necesidades del mundo de la medicina

Nuestra experiencia global



Soporte y servicio posventa

Nos esforzamos para brindarle un servicio con los más altos estándares, no sólo a través de nuestros exclusivos socios y distribuidores para mantenimiento y servicios, sino también en la resolución de problemas en segunda línea y el servicio posventa. Este grupo de ingenieros en planta está allí para ayudar a nuestros socios y a usted a encontrar la mejor solución para sus necesidades de almacenamiento en frío.



medical
systems

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems (anteriormente Dometic Medical Systems) tiene más de 40 años de experiencia en el sector de la refrigeración médica.

La empresa, conocida antiguamente como Electrolux Medical Systems, fue fundada en 1979 cuando la Organización Mundial de la Salud se puso en contacto con Electrolux en Vianden (Luxemburgo) para desarrollar una solución para el almacenamiento y transporte seguro de vacunas alrededor del mundo. En 2001, Electrolux Medical Systems pasó a formar parte de Dometic Group, y cambió su nombre a Dometic Medical Systems. En 2015 después de MBO, la empresa fue nombrada B Medical Systems.

B Medical Systems S.à r.l.

17, op der Hei
L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Tel.: (+352) 92 07 31-1
Fax: (+352) 92 07 31-300
info@bmedicalsyste.ms.com



www.bmedicalsyste.ms.com

WE SUPPORT



Desde 2019 B Medical Systems ha estado comprometido con la iniciativa de responsabilidad corporativa del Pacto Mundial de la ONU y sus principios en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

Luxemburgo, en el corazón de Europa

