

GT MINI



medical systems

Zuverlässige Temperaturüberwachungslösung
zur Gewährleistung der Sicherheit temperaturempfindlicher Proben.

Hauptmerkmale



Temperaturüberwachung mit hoher Präzision, die einen weiten Temperaturbereich abdeckt.



Datenzugänglichkeit über Mobil- und Webportal.



Anpassbare Einstellungen für Temperaturgrenzwerte, Datenerfassungsfrequenz usw., um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.



Exportierbare Temperaturberichte im XLS- und PDF-Formaten.



Zugriff auf die letzten **50 Datensätze** über die mobile App



Zugriff auf **Datenhistorie** über Webportal



Speicherung der Daten auf dem GT Mini für **30 Tage**


GT Mini
Installiert auf dem
Medizinprodukt

Betriebs-
temperaturbereich
-10°C bis +60°C



TempSense 810
Im Inneren des
Medizinprodukts platziert

Betriebs-
temperaturbereich
-20°C bis +65°C

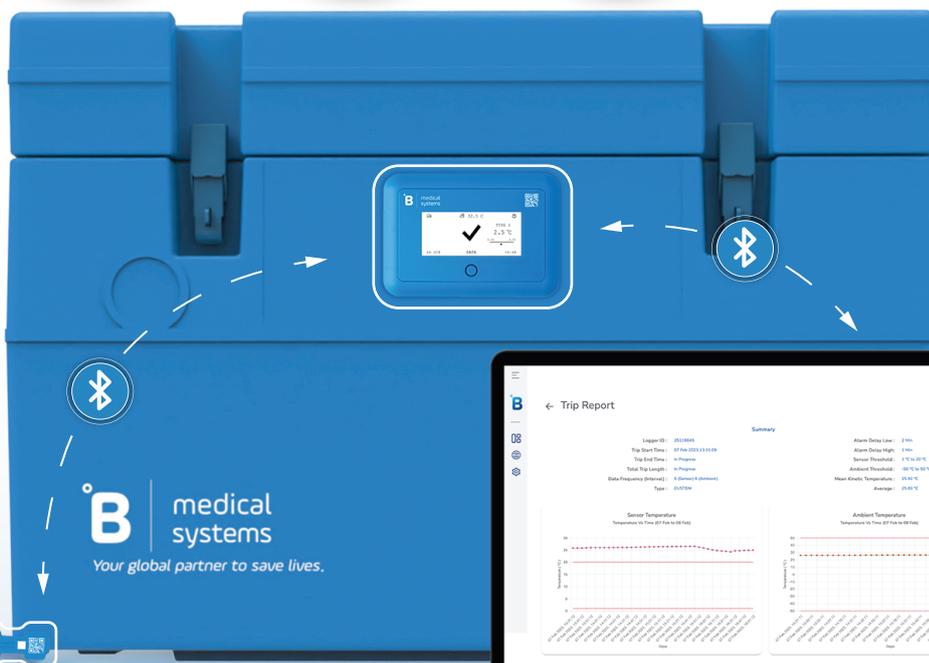

Multimodus-Betrieb und Zugriffslevel die Ihren Anforderungen entsprechen



3 Konfigurationsmodi
über die mobile App



30-Tage-Modus

Für stationäre /
Langstrecken-Transporte.



Trip-Modus

Für schnelle Transporte /
kleine Proben transfers.



Lagermodus

Batteriesparmodus, wenn das
Gerät nicht verwendet wird.



2 Arten des
Benutzerzugriffs auf
dem Webportal



Admin

Verwalten Sie Einheiten und Benutzer.



Benutzer

Export oder Zugriff auf Informationen.

Hauptmerkmale: GT Mini

Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C
Temperatursensor-Typ	Digital
Temperatursensor-Genauigkeit	±0.1°C (max) von -20°C bis +50°C ±0.15°C (max) von -40°C bis +70°C
Bildschirm-Typ	E-Ink-Display
Lautstärke des Summers	75 dB
Verbindungstechnik	Bluetooth Low Energy (BLE)
Batteriekapazität	4000 mAh
Wasserdichtigkeitsschutz	IP65

Hauptmerkmale: TempSense 810

Betriebstemperatur	-20°C bis +65°C
Temperatursensor-Typ	Digital
Temperatursensor-Genauigkeit	±0.1°C (max) von -20°C bis +50°C ±0.15°C (max) von -40°C bis +70°C
Batteriezellen	2
Batteriekapazität pro Zelle	345 mAh
Wasserdichtigkeitsschutz	IP67

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems S.à.r.l

B Medical Systems ist ein weltweit tätiger Hersteller und Vertreiber von medizinischen Geräten mit über 40 Jahren Erfahrung in der Industrie.

Kontakt:

17, op der Hei, Hosingen L-9809, Luxembourg

Tel: +352 92 07 31 1 | E-Mail: info@bmedicalsyste.ms.com | www.bmedicalsyste.ms.com

