

GT MINI



medical
systems

Solución Confiable de Control de Temperatura

para garantizar la seguridad de muestras sensibles a los cambios de temperatura.

Características Principales



Control de Temperatura con alta precisión cubriendo un amplio rango de temperatura.



Accesibilidad a los Datos a través de Móviles y Portal Web.



Ajustes personalizables respecto a umbrales de temperatura, frecuencia de toma de datos etc. para adaptarse a sus necesidades.



Informes de Temperatura Exportables en formatos XLS y PDF.



Acceso a los últimos
50 registros vía
aplicación móvil




Acceso al **historial**
de datos a través
del portal web



Datos almacenados
en el dispositivo GT
Mini durante
30 días



GT Mini
Instalado en el
dispositivo médico

Rango de temperatura
de funcionamiento
-10°C a +60°C

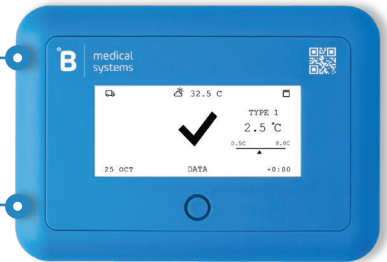

TempSense 810
Situado en el interior del
dispositivo médico

Rango de temperatura
de funcionamiento
-20°C a +65°C

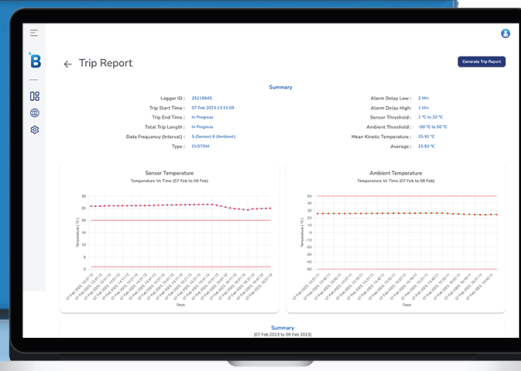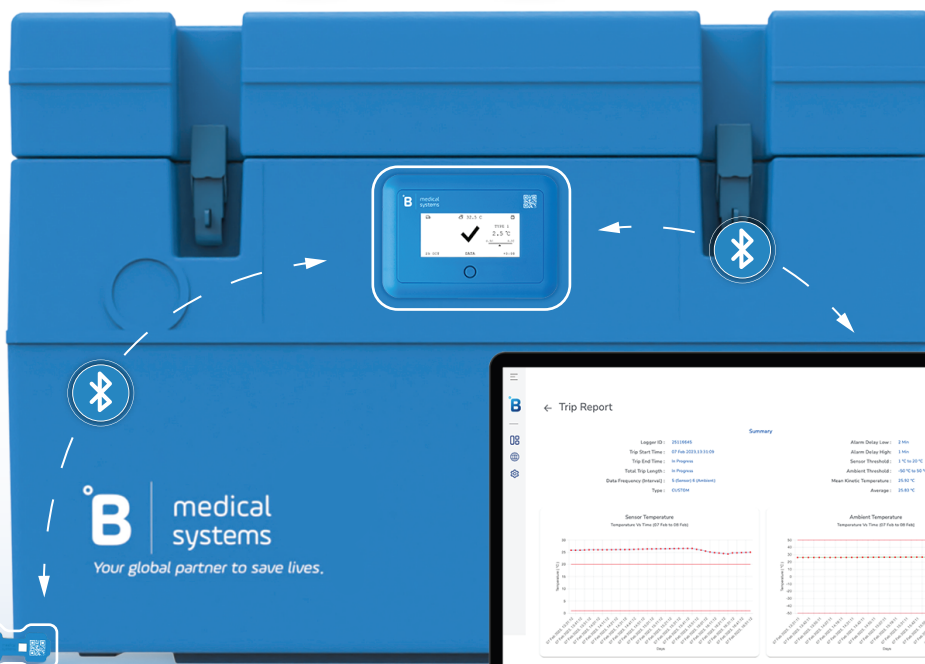

Operaciones Multimodo y Niveles de Acceso

que se adaptan a sus necesidades



3 Modos de Configuración a través de la Aplicación Móvil



Modo 30-Días



Para transportes estacionarios / de larga distancia.



Modo Viaje



Para transportes rápidos / traslados de muestras pequeñas.



Modo Almacén



Un modo de ahorro de batería cuando el dispositivo no está en uso.



2 Tipos de Acceso de Usuarios en el Portal Web



Admin



Gestionar las unidades y los espectadores.



Visualizador



Acceder o exportar información.

Especificaciones Principales: GT Mini ✓

Temperatura de funcionamiento	-10°C a +60°C
Tipo de sensor de temperatura	Digital
Precisión del sensor de temperatura	±0.1°C (máximo) de -20°C a +50°C ±0.15°C (máximo) de -40°C a +70°C
Tipo de pantalla	Pantalla E-ink
Volumen del timbre	75 dB
Tecnología de conectividad	Bluetooth de Baja Energía (BLE)
Capacidad de la batería	4000 mAh
Protección contra el agua	IP65

Especificaciones Principales: TempSense 810 ✓

Temperatura de funcionamiento	-20°C a +65°C
Tipo de sensor de temperatura	Digital
Precisión del sensor de temperatura	±0.1°C (máximo) de -20°C a +50°C ±0.15°C (máximo) de -40°C a +70°C
Celdas de la batería	2
Capacidad de la batería por celda	345 mAh
Protección contra el agua	IP67

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems S.à r.l

B Medical Systems es un fabricante y distribuidor mundial de dispositivos grado médico con más de 40 años de experiencia industrial.

Contacto:

17, op der Hei, Hosingen L-9809, Luxembourg

Tel: +352 92 07 31 1 | Email: info@bmedicalsyste.ms.com | www.bmedicalsyste.ms.com

