

Vaccine Cold Chain

Congélateur rotomoulé à large capacité pour Vaccins/Water-packs: TVW 4000 AC



TVW 4000 AC

Capacité de stockage des vaccins: 240 L
Capacité de stockage de water-packs congelés: 318 x 0.6 L (sans paniers)

Congélateur de Vaccins/Water-packs

Point de consigne: -25°C
Temps de maintien en température: 50h 9min¹

1. mesuré à +43°C

**CERTIFIÉ
PQS
E003/138**



Congélateur de Vaccins/Water-packs

Les congélateurs pour vaccins/blocs réfrigérants sont des appareils destinés au stockage sécurisé des **vaccins** à des températures de congélation ou à la congélation de **water-packs** au moyen d'un système de refroidissement à compression alimenté en courant alternatif et d'un revêtement de PCM



En option - Dispositif de surveillance de la température à distance (RTMD)

Avec communication prépayée pour la durée de la période de garantie et offrant une surveillance à distance en temps réel dans le monde entier, un accès aux données via le WEB et la localisation GPS




Garantie internationale de 3 ans pour toutes les pièces et la main-d'œuvre




Isolation de grande qualité

- Structure rotomoulée: inoxydable et extrêmement robuste
- 100mm de mousse en polyuréthane garantissent le temps de maintien en température le plus élevé possible
- Joints doubles en silicone (remplaçables) et fermetures verrouillables assurent une étanchéité optimale

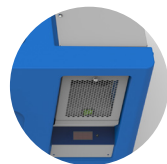

Système électronique intégré

- Contrôleur électronique avec LED intégrée et surveillance digitale de la température
- Surveillance de la température maintenue en cas de défaillance du système
- Réfrigérant respectueux de l'environnement (R290)

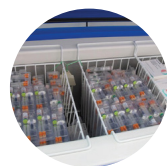

Caractéristiques spéciales

- Livré avec 6 paniers de stockage en fil métallique
- Faible consommation d'énergie: 4,45 kWh/24h à +43°C (fonctionnement stable)
- Conception d'une réserve de matériaux à changement de phase (PCM) qui protège les vaccins en maintenant leur température en dessous de -15°C pendant 34 heures en cas de panne de courant



Spécifications Techniques: TVW 4000 AC

<i>Fonction</i>		Congélateur de Vaccins/Water-packs
<i>Classe climatique</i>		Zone chaude (+43°C)
<i>Capacité de stockage des vaccins (L)</i>		240
<i>Plage de tension</i>		220-240V 50/60Hz
<i>Source d'Énergie</i>		AC
<i>Réfrigérant</i>		R290
<i>Matériaux externes / internes</i>		Polyéthylène
<i>Dimensions (Externes)</i>	<i>Hauteur (mm)</i>	915
	<i>Largeur (mm)</i>	1600
	<i>Profondeur (mm)</i>	780
<i>Dimensions (Expédition)</i>	<i>Hauteur (mm)</i>	1040
	<i>Largeur (mm)</i>	1660
	<i>Profondeur (mm)</i>	805
<i>Poids (kg)</i>		188
<i>Accessoires</i>		6 paniers de stockage de vaccins 2 séparateurs 1 brosse
<i>Certification PQS de l'OMS (Applicable uniquement au mode Congélateur de Vaccins)</i>		E003/138
<i>Réglementation Européenne des Dispositifs Médicaux</i>		(UE) 2017/745: Classe I

Données de Performance: TVW 4000 AC

<i>Temps de maintien en température à +43°C</i>	50h 9min
<i>Refroidissement</i>	15h à +43°C
<i>Consommation d'énergie stable</i>	4.45 kWh/24h à +43°C
<i>Consommation d'énergie lors du refroidissement</i>	4.06 kWh/24h à +43°C
<i>Congélation de water-packs</i>	36.4kg/24h à +43°C (64 water-packs de 0.6L)
<i>Capacité de stockage de water-packs congelés</i>	318 x 0.6 L (sans paniers)

B Medical Systems S.à r.l

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems est un fabricant et un distributeur mondial de dispositifs médicaux, fort de plus de 40 ans d'expérience industrielle.

Contact:
17, op der Hei, L-9809 Hosingen, Luxembourg

Tel.: +352 92 07 31-1 | Email: info@bmedicalsystems.com | www.bmedicalsystems.com

